



FI.5041

FI.5040



FI.5043



FI.5042

Este manual refere-se aos produtos cujas referências são:

Ref.	ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI ATOXICA	LEITO BIPARTIDO MADEIRA E ESPUMA (≈50MM) REVESTIDO A NAPA		BASE	ELEVAÇÃO		Peso Kg
		Com Abertura Facial	Sem Abertura Facial		Elétrica	Hidráulica	
FI.5040	✓	Leito Único (Inteiro) Sem Abertura Facial		4 RODAS COM SISTEMA DE IMOBILIZAÇÃO	✓		90
FI.5041	✓				✓		90
10.5040.A.1183	✓	✓			✓		90
FI.5043	✓		✓		✓		90
FI.5042	Aço Inox e Madeira	Não aplicável		Não aplicável	Regulação Manual		6

NOTA: Apenas a Mesa de Trabalho FI.5042, necessita de ser montada no Plano/Mesa. Os planos/mesas indicados neste folheto não carecem de montagem por parte do cliente, exceto o pousa pés (ver fig 3).

DEFINIÇÃO

Os Planos Inclinados ou Mesas de Verticalização foram concebidos para exercícios de reabilitação (ex.: área de neurologia, ortopedia, fisioterapia, doenças reumáticas) auxiliando a colocar o corpo do paciente na posição horizontal ou vertical.


CUIDADOS E INDICAÇÕES A TER EM ATENÇÃO

Antes de utilizar, manusear ou limpar deve ler atentamente estas indicações e seguir as recomendações do fabricante:

Verticalização Correta



Verticalização Errada

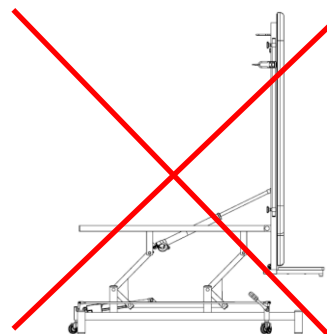

- ✓ **ATENÇÃO:** A VERTICALIZAÇÃO do plano/mesa **só deve ser efetuada** com este **na altura MAIS BAIXA** ou seja nos 540mm e com o paciente devidamente seguro pelos 3 cintos. A elevação em altura deste plano/mesa não deve ser acionada sempre que o paciente esteja na posição Vertical. Após a passagem da posição vertical para a horizontal é seguro fazer a elevação em altura do leito.
- ✓ **ATENÇÃO** ao perigo de esmagamento ou lesão das mãos/dedos: Entre a estrutura e as zonas articuladas do produto, durante a movimentação e colocação na posição horizontal e vertical. Entre a Cabeceira e respetiva zona de articulação, a estrutura de elevação do plano e a zona de imobilização das rodas.
- ✓ Após deslocação do produto que possui rodas (75mm), estas devem ser travadas com o sistema de imobilização de forma a evitar deslocamentos imprevistos que coloquem em perigo o doente ou utilizador.
- ✓ O paciente deverá sentar-se unicamente sobre a zona central do estofo. Baixar se necessário a altura do plano (FI.5040) para facilitar a subida do paciente.
- ✓ A **elevação em altura e verticalização** do plano FI.5040/3 e 10.5040.A.1183 é efetuada por um comando de mão c/ **4 botões**, (ver fig. 1).
- ✓ A **verticalização** do plano FI.5041 é efetuada por um comando de mão com **2 botões**, (ver fig. 2).
- ✓ A articulação da cabeceira é efetuada por meio de uma cremalheira que regula o ângulo da cabeceira na posição desejada. Para voltar à posição 0° tem de ser aberta ao máximo e depois fazer o movimento de descida até encostar ao leito (ref's FI.5043 e 10.5040.A.1183).
- ✓ Os planos/mesas não devem ser usados como carro de transporte.
- ✓ Os planos/mesas estão preparados para receber um paciente de cada vez, com peso até 135 Kg.
- ✓ Antes de colocar o paciente no plano/mesa certifique-se se a estrutura está corretamente instalada / montada.

RECOMENDA-SE:

- ✓ Que antes da colocação do paciente seja efetuada uma verificação do funcionamento, acionando as articulações e verificando o aperto dos componentes do plano/mesa por forma a garantir uma utilização em segurança.
- ✓ Que o Plano/mesa só deve ser usado apenas para o fim para o qual foi concebido.
- ✓ A supervisão constante do produto por pessoal autorizado durante a sua utilização.
- ✓ O uso de um lençol de pano ou papel entre o colchão e o paciente.
- ✓ O transporte/movimentação do produto por pelo menos duas pessoas.
- ✓ Que se desligue os planos/mesas após alcançar uma altura ou verticalização pretendida, ou o afastamento do comando para uma zona protegida, a fim de evitar acionamentos involuntários.
- ✓ **Por razões de segurança** recomenda-se que a elevação em altura não seja a mais de 800mm.
- ✓ O conjunto estofado do plano/mesa é inflamável não devendo ser colocado próximo de fontes de ignição.

LIMPEZA

- ✓ Nas operações de limpeza/manutenção não utilizar detergentes e/ou materiais que possam danificar ou riscar o produto. Quando não for suficiente a limpeza com um pano seco, usar uma esponja molhada em água com sabão e secar a superfície logo de seguida. Evitar que a água penetre nas costuras. A frequência da limpeza deve ser determinada em função das necessidades, do local onde o produto se encontra e das vezes que é usado. Para a limpeza de manchas não usar álcool, dissolventes ou outros produtos do mercado pois podem danificar o artigo. Na estrutura usar um produto apropriado para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos.

DADOS TÉCNICOS

- ✓ O nível de ruído do motor é de <48 dB(A) (indicação do fabricante). Motor MBZ 6000N e Megamat MCZ 4000N. Os motores possuem um transformador 230/24V (cabo corte corrente) que protege o utilizador de qualquer eventual choque elétrico.

- ✓ Os motores têm marcação CE e garantia de 2 anos contra comprovados defeitos de fabrico e estão conforme as exigências das Diretivas Comunitárias respeitantes à Compatibilidade Eletromagnética e às Baixas Tensões. Esta garantia não cobre os danos causados pelo mau manuseamento do motor, cabo, comando, transformador e ficha.
- ✓ Evitar o derramamento de líquidos por cima do motor e do comando.
- ✓ Chamamos a atenção para o cuidado a ter com o manuseamento do motor / ficha, por se tratar de um produto sensível não pode sofrer qualquer tipo de pressão ou impacto porque pode danificar internamente os circuitos elétricos, recomenda-se a recolha do cabo e do comando aquando da deslocação.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE (ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM)


- ✓ A JMS, procura proteger o meio ambiente e as futuras gerações. Portanto, faz parte da sua política da qualidade, a atenção ao desenvolvimento, à inovação, produção e utilização de tecnologias e materiais que respeitem o ambiente.
- ✓ Os produtos JMS não contêm substâncias perigosas, nomeadamente chumbo, cádmio, mercúrio, amianto, PCB ou CFC!
- ✓ O motor após o seu tempo de vida útil deve ser entregue a uma entidade licenciada para eliminação de resíduos de acordo com a legislação em vigor.
- ✓ Todos os materiais usados nos produtos da JMS (aços, plásticos, papel/cartão, madeiras) são recicláveis, por isso devem ser separados e encaminhados para reciclagem ao abrigo da legislação em vigor.




EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

- ✓ Os planos/mesas de verticalização enquanto armazenados devem permanecer dentro da embalagem na posição horizontal, com o estofo para cima, num espaço resguardado do clima exterior, seco e livre de quedas de objetos que possam danificar o produto não sobrepondo outra carga ao produto (não empilhar).
- ✓ Os planos/mesas são fornecidos embalados. Antes do seu funcionamento deve-se montar apenas o pausa-pés (ver fig 3).
- ✓ A JMS não assume qualquer responsabilidade por danos causados por mau uso, desrespeito destas ou outras indicações ou negligência na utilização e manuseamento do produto.
- ✓ À JMS reserva-se o direito de efetuar qualquer alteração ao design, funcionalidade, estética e comercialização dos seus produtos, em qualquer altura, sem aviso prévio, bem como, a atualização deste manual sempre que necessário.

Figuras

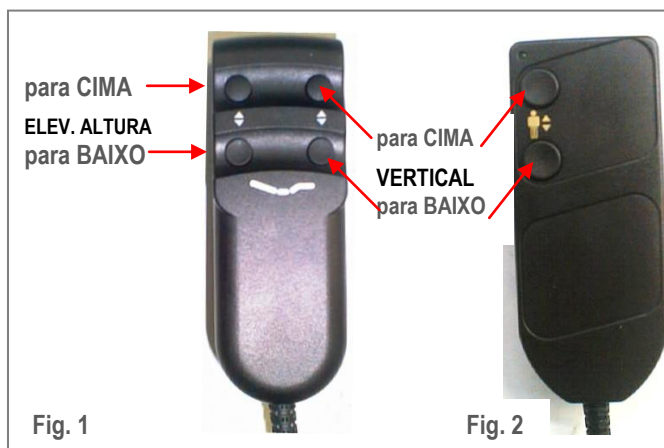

Montagem Pousa-Pés

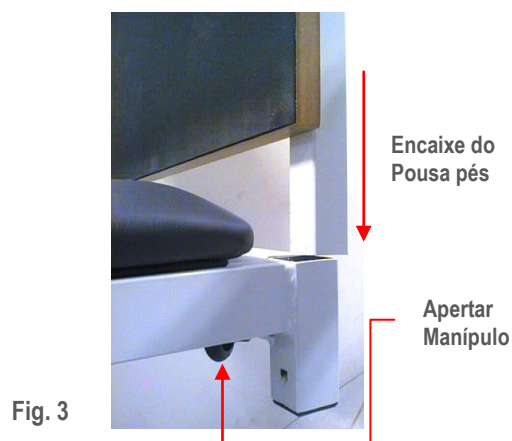



Nota: Durante a elevação do leito do plano/mesa, entre a posição mais baixa e a mais alta existe um deslocamento do leito de 75mm para o lado da cabeceira.



Muita atenção a este símbolo, ele está localizado junto das zonas de contato de duas superfícies, podendo ocorrer esmagamento devido ao movimento das secções articuladas, caso os dedos ou mãos estejam sobre zona de contato.

DIMENSÕES E ÂNGULOS

**10.5040.A.1183
FI.5043**

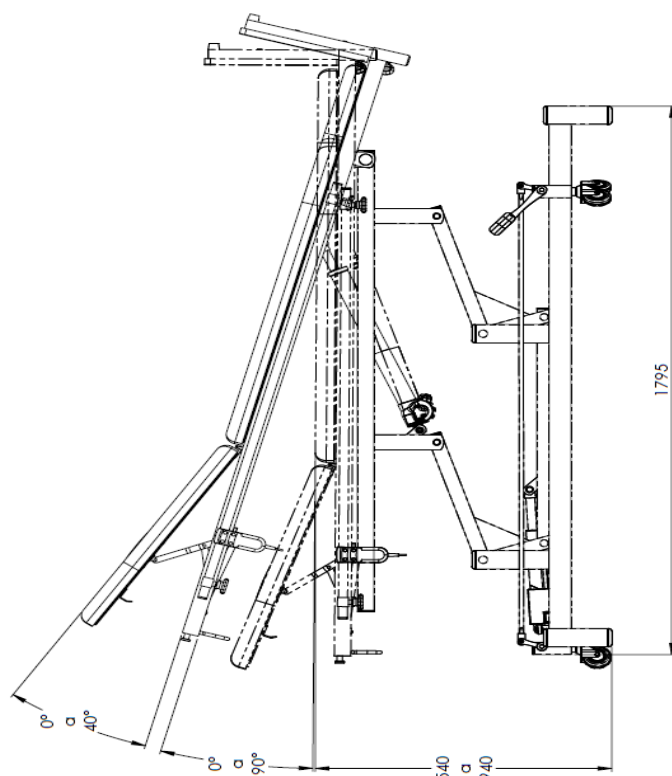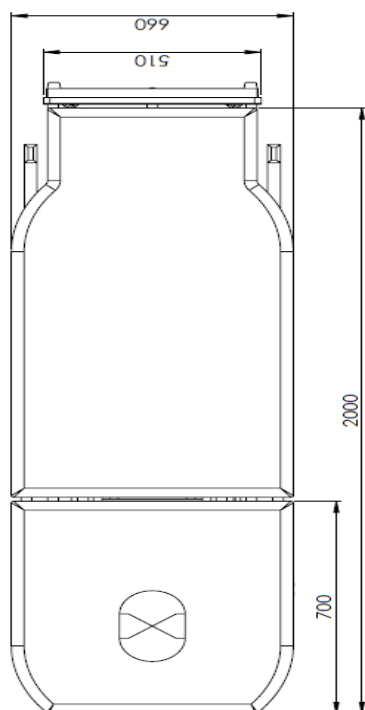

FI.5040/1

